

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.bowa.nt-rt.ru | | bwa@nt-rt.ru

Технические характеристики на нейтральные электроды КОМПАНИИ **BOWA**

Нейтральный электрод стандарт для взрослых 250x150 мм Bowa

Артикул: 242-003



Многоразового пользования.

Для взрослых.

250 x 150 мм

Стандартный.

Многоразовые нейтральные электроды из проводящего силикона замыкают монополярную цепь на пассивной стороне между электрохирургической установкой и пациентом.

Электроды крепятся к пациенту с помощью резиновой ленты.

Дополнительный соединительный кабель подключает его к генератору.

Воспользуйтесь преимуществами современного гидрогеля и окружности электрода расщепления для обеспечения максимальной безопасности в каждом ОР.

Сочетание новой анатомически оптимизированной конструкции и жидкого репеллента пеноматериала обеспечивает идеальную адаптацию тела и защиту.

Используя все стандартные функции, такие как защиты от натяжения, каркасом безопасности и дополнительным кабелем.

Для использования в общей хирургии, дерматологии, гастроэнтерологии, гинекологии, ЛОР, кардиохирургии, педиатрической хирургии, лицевой хирургии.

А также в нейрохирургии, ортопедии и травматологии, пластической и эстетической хирургии, пульмонологии, торакальной хирургии, урологии, висцеральной хирургии.


Нейтральный электрод Bowa стандарт для взрослых 250x150 мм

- Целевое назначение: Предназначен для замыкания электрической цепи между пациентом и РЧ генератором на пассивной стороне.
- Размер / Размеры: 375 см²
- Кабель: 0,5 м
- Общий вес брутто: 454 G
- Вес нетто: 279 G
- Монополярный / биполярный / пассивный: Пассивный
- Одноразовые / многоразовые: Многоразовый
- Стерильно / нестерильно: Нестерильный
- Очистка / дезинфекция: Автоклав
- Подготовка: 75 циклов
- Допустимые комбинации: 295-050, 385-050, 194-075
- Маркировка соответствия CE: Да
- Классификация медицинских устройств ЕС: I
- Примечание: без разделения, для взрослых > 15 кг

Комплектация

Электрод - 1 шт

Нейтральный электрод разовый разделенный 160см² Bowa

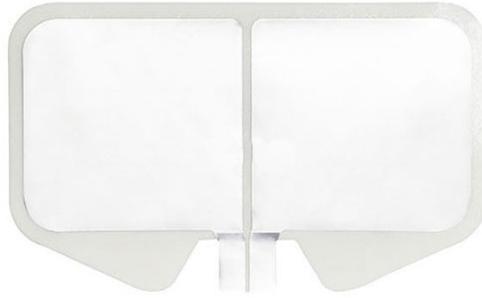

Артикул: 816-161

Одноразового пользования.

Разделенный, 160 см².

Кольцо безопасности для оптимального тока симметрии и идеальной поддержки современных систем мониторинга качества контакта.

С помощью нейтральных электродов BOWA MEDICAL возможно надежное соединение между электрохирургической установкой и пациентом.

Современный гидрогель и универсальное распределение электродов обеспечивают максимальную безопасность пациента.

Сочетание нового анатомически оптимизированного дизайна и водоотталкивающего внешнего вида обеспечивает идеальную адаптацию и защиту тела.

Одноразовые нейтральные электроды впечатляют своими идеальными тепловыми свойствами.

Низкое тепловыделение во время активации обеспечивает максимальную безопасность пациента.

Тонкий слой гидрогеля нейтральных электродов BOWA MEDICAL обеспечивает более быстрое рассеивание тепла и значительно меньший нагрев.

Сочетание новой анатомически оптимизированной конструкции и жидкого репеллента пеноматериала обеспечивает идеальную адаптацию тела и защиту.

Используя все стандартные функции, такие как защиты от натяжения, каркасом безопасности и дополнительным кабелем.

Для использования в общей хирургии, дерматологии, гастроэнтерологии, гинекологии, ЛОР, кардиохирургии, педиатрической хирургии, лицевой хирургии.

А также для нейрохирургии, ортопедии и травматологии, пластической и эстетической хирургии, пульмонологии, торакальной хирургии, урологии, висцеральной хирургии.

Электроды доступны в различных исполнениях и имеют стандартный контактный язычок 25 мм или фиксированный соединительный кабель.

Предназначен для замыкания электрической цепи между пациентом и РЧ генератором на пассивной стороне.

Нейтральный электрод Bowa разовый разделенный 160см²


- Размер / Размеры: 160 см²
- Кабель: Без кабеля
- Общий вес брутто: 1248 г
- Вес нетто: 10 G
- Монополярный / биполярный / пассивный: Пассивный
- Одноразовые / многоразовые: Одноразового использования
- Стерильно / нестерильно: Нестерильный
- Подготовка: Не допустимо
- Допустимые комбинации: 101-150, 294-050, 380-050, 386-050, разрешенные генераторы см. Список совместимости
- Маркировка соответствия CE: Да
- Классификация медицинских устройств ЕС: IIb
- Примечание: сплит, для взрослых > 15 кг

Комплектация

ВЧ-инструмент - 1 шт

Инструкция по применению

Нейтральный электрод разовый EASY разделенный 90cm² Bowa

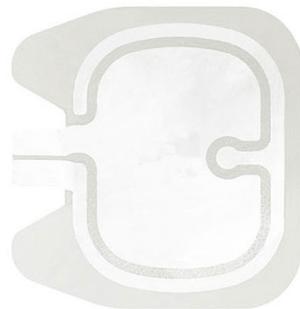

Артикул: 816-092

Одноразового пользования.

Для новорожденных.

Разделенный, 90 см².

Уп=100 шт.

Одноразовые нейтральные электроды от BOWA MEDICAL обеспечивают оптимальный контакт между электрохирургической установкой и пациентом.

Современный гидрогель и универсальное распределение электродов обеспечивают высокий уровень безопасности пациента.

Сочетание нового анатомически оптимизированного дизайна и водоотталкивающего внешнего вида обеспечивает идеальную адаптацию и защиту тела.

Нейтральные электроды обладают такими полезными функциями, как разгрузка от натяжения, безопасные кромки и оптимизированный кабель.

Предварительно подключенный кабель имеет очень плоское соединение.

Это сводит к минимуму риск возникновения точек давления в точках соединения на теле пациента.

Нейтральные электроды BOWA MEDICAL впечатляют своими идеальными тепловыми свойствами.

Благодаря низкому тепловыделению во время активации нейтральные электроды обеспечивают максимальную безопасность пациента.

Тонкий слой гидрогеля обеспечивает более быстрое рассеивание тепла и значительно меньший нагрев по сравнению с текущим рыночным стандартом.

Продукция имеет знак CE в соответствии с директивой 93/42 СОС и соответствует стандартам DIN EN ISO 10993 и IEC 60601-2-2.

Нейтральный электрод Bowa разовый EASY разделенный 90cm²

Целевое назначение: предназначены для замыкания электрической цепи между пациентом и РЧ генератором на пассивной стороне.

Размер / Размеры: 90 см²

Кабель: Без кабеля

Общий вес брутто: 8,5 г

Вес нетто: 6 г

Монополярный / биполярный / пассивный: Пассивный

Одноразовые / многоразовые: Одноразового использования

Стерильно / нестерильно: Нестерильный

Подготовка: Не допустимо

Допустимые комбинации: 101-150, 294-050, 380-050, 386-050, разрешенные генераторы см. Список совместимости

Маркировка соответствия CE: ДА

Классификация медицинских устройств ЕС: IIb

Примечание: отдельный, универсальный > 5 кг

Комплектация

Электрод - 100 шт.

Нейтральный электрод для взрослых 250x150мм ERBE Bowa

Артикул: 193-008



Нейтральный электрод многоразового пользования, для взрослых, размер 250 x 150 мм, для ERBE.

Многоразовые нейтральные электроды из проводящего силикона замыкают монополярную цепь на пассивной стороне между электрохирургической установкой и пациентом.

Электроды крепятся к пациенту с помощью резиновой ленты.

Дополнительный соединительный кабель подключает его к генератору.

Кольцо безопасности для оптимального тока симметрии и идеальной поддержки современных систем мониторинга качества контакта.

Воспользуйтесь преимуществами современных гидрогеля и окружности электрода расщепления для обеспечения максимальной безопасности в каждом OR.

Сочетание новой анатомически оптимизированной конструкции и жидкого репеллента пеноматериала обеспечивает идеальную адаптацию тела и защиту.

Используя все стандартные функции, такие как защиты от натяжения, каркасом безопасности и дополнительным кабелем.

Нейтральный электрод Bowa для взрослых 250x150мм ERBE

- Целевое назначение: для замыкания электрической цепи между пациентом и РЧ генератором на пассивной стороне.
- Размер / Размеры: 375 см²
- Кабель: 0,5 м
- Общий вес брутто: 460 г
- Вес нетто: 267 г
- Монополярный / биполярный / пассивный: Пассивный
- Одноразовые / многоразовые: Многоразовый
- Стерильно / нестерильно: Нестерильный
- Очистка / дезинфекция: Автоклав
- Подготовка: 75 циклов
- Допустимые комбинации: 101-003, 194-075
- Маркировка соответствия CE: ДА
- Классификация медицинских устройств ЕС: I
- Примечание: без разделения, для взрослых > 15 кг

Комплектация

Электрод - 1 шт

Нейтральный электрод разовый не разделенный 140cm² 3м Bowa



Артикул: 817-140

Нейтральный электрод одноразового пользования, не разделенный, размер 140 см², с кабелем 3 м, в упаковке 15 шт.

С помощью нейтральных электродов возможно надежное соединение между электрохирургической установкой и пациентом.

Современный гидрогель и универсальное распределение электродов обеспечивают максимальную безопасность пациента.

Сочетание нового анатомически оптимизированного дизайна и водоотталкивающего внешнего вида обеспечивает идеальную адаптацию и защиту тела.

Одноразовые нейтральные электроды впечатляют своими идеальными тепловыми свойствами.

Низкое тепловыделение во время активации обеспечивает максимальную безопасность пациента.

Тонкий слой гидрогеля нейтральных электродов обеспечивает более быстрое рассеивание тепла и значительно меньший нагрев.

Инновационный гидрогель: сверхтонкий слой гидрогеля обеспечивает низкую теплоотдачу, оптимальный контакт с кожей и поглощение влаги.

Адаптация к телу: эластичное поролоновое покрытие для идеальной адаптации к форме тела.

Водоотталкивающий: дополнительная защита за счет водоотталкивающего материала.

Защита: склеенные защитные края для оптимальной фиксации и изоляции.

Универсальный сейф: предохранительное кольцо для оптимальной симметрии тока и идеальной поддержки для современных систем контроля качества контактов.

Электроды доступны в различных исполнениях и имеют стандартный контактный язычок 25 мм или фиксированный соединительный кабель.


Нейтральный электрод Bowa разовый не разделенный 140cm² 3м

- Целевое назначение: предназначены для замыкания электрической цепи между пациентом и РЧ генератором на пассивной стороне.
- Размер / Размеры: 140 см²
- Кабель: 3 м.
- Общий вес брутто: 772 г
- Вес нетто: 36 г
- Монополярный / биполярный / пассивный: Пассивный
- Одноразовые / многоразовые: Одноразового использования
- Стерильно / нестерильно: Нестерильный
- Подготовка: Не допустимо
- Тип коннектора: 2-контактный International NON-REM
- Допустимые комбинации: Разрешенные генераторы см. В списке совместимости
- Маркировка соответствия CE: ДА
- Классификация медицинских устройств ЕС: IIb
- Примечание: без разделения, для взрослых > 15 кг

Комплектация
Электрод - 15 шт

Нейтральный электрод разовый EASY разделенный 160см² 3м

Артикул: 818-162

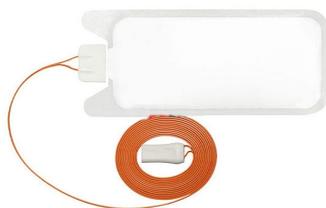


С помощью нейтральных электродов BOWA MEDICAL возможно надежное соединение между электрохирургической установкой и пациентом.
Современный гидрогель и универсальное распределение электродов обеспечивают максимальную безопасность пациента.
Сочетание нового анатомически оптимизированного дизайна и водоотталкивающего внешнего вида обеспечивает идеальную адаптацию и защиту тела.
Одноразовые нейтральные электроды впечатляют своими идеальными тепловыми свойствами.
Низкое тепловыделение во время активации обеспечивает максимальную безопасность пациента.
Тонкий слой гидрогеля нейтральных электродов BOWA MEDICAL обеспечивает более быстрое рассеивание тепла и значительно меньший нагрев.
Инновационный гидрогель: сверхтонкий слой гидрогеля обеспечивает низкую теплоотдачу, оптимальный контакт с кожей и поглощение влаги
Адаптация к телу: эластичное покрытие из вспененного материала для идеальной адаптации к форме тела
Жидкоотталкивающие: дополнительная защита за счет водоотталкивающих веществ снаружи
Защита: склеенные защитные кромки для оптимальной фиксации и изоляции
Полная безопасность: предохранительное кольцо для оптимальной симметрии тока и идеальной поддержки для современных систем контроля качества контактов
Электроды доступны в различных исполнениях и имеют стандартный контактный язычок 25 мм или фиксированный соединительный кабель.
Нейтральный электрод разовый EASY разделенный 160см² 3м

- Размер : 160 см²
- Кабель: 3 м
- Общий вес брутто : 987 г
- Вес нетто : 41 г
- Монополярный / биполярный / пассивный : Пассивный
- Одноразовые / многоразовые : Одноразового использования
- Стерильно / нестерильно : Нестерильный
- Подготовка : Не допустимо
- Тип коннектора: 2-контактный International REM
- Допустимые комбинации : Разрешенные генераторы
- Примечание : сплит, для взрослых > 15 кг

Комплектация

Нейтральный электрод разовый EASY разделенный
160см² 3м - 15 шт.

Нейтральный электрод разовый разделенный 160см² 3м

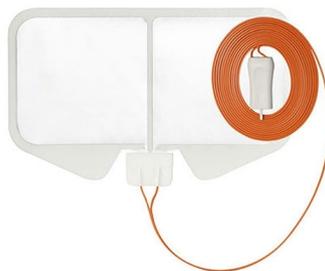

Артикул: 818-161


С помощью нейтральных электродов BOWA MEDICAL возможно надежное соединение между электрохирургической установкой и пациентом. Современный гидрогель и универсальное распределение электродов обеспечивают максимальную безопасность пациента. Сочетание нового анатомически оптимизированного дизайна и водоотталкивающего внешнего вида обеспечивает идеальную адаптацию и защиту тела. Одноразовые нейтральные электроды впечатляют своими идеальными тепловыми свойствами. Низкое тепловыделение во время активации обеспечивает максимальную безопасность пациента. Тонкий слой гидрогеля нейтральных электродов BOWA MEDICAL обеспечивает более быстрое рассеивание тепла и значительно меньший нагрев. Инновационный гидрогель: сверхтонкий слой гидрогеля обеспечивает низкую теплоотдачу, оптимальный контакт с кожей и поглощение влаги. Адаптация к телу: эластичное покрытие из вспененного материала для идеальной адаптации к форме тела. Жидкоотталкивающие: дополнительная защита за счет водоотталкивающих веществ снаружи. Защита: склеенные защитные кромки для оптимальной фиксации и изоляции. Полная безопасность: предохранительное кольцо для оптимальной симметрии тока и идеальной поддержки для современных систем контроля качества контактов. Электроды доступны в различных исполнениях и имеют стандартный контактный язычок 25 мм или фиксированный соединительный кабель. Нейтральный электрод разовый разделенный 160см² 3м

- Размер : 160 см²
- Кабель: 3 м
- Общий вес брутто : 987 г
- Вес нетто : 41 г
- Монополярный / биполярный / пассивный : Пассивный
- Одноразовые / многоразовые : Одноразового использования
- Стерильно / нестерильно : Нестерильный
- Подготовка : Не допустимо
- Тип коннектора: 2-контактный International REM
- Допустимые комбинации : Разрешенные генераторы
- Примечание : сплит, для взрослых > 15 кг

Комплектация

Нейтральный электрод разовый разделенный 160см² 3м - 15 шт.

Нейтральный электрод разовый разделенный 140см² 3м

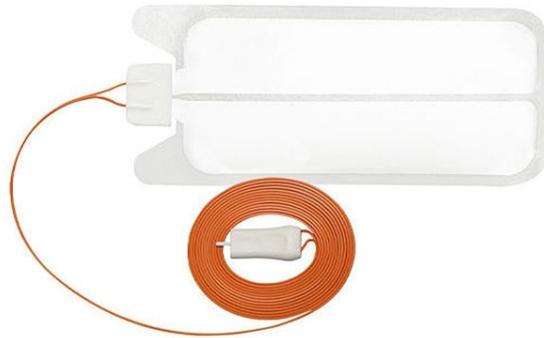

Артикул: 818-141

С помощью нейтральных электродов BOWA MEDICAL возможно надежное соединение между электрохирургической установкой и пациентом. Современный гидрогель и универсальное распределение электродов обеспечивают максимальную безопасность пациента. Сочетание нового анатомически оптимизированного дизайна и водоотталкивающего внешнего вида обеспечивает идеальную адаптацию и защиту тела. Одноразовые нейтральные электроды впечатляют своими идеальными тепловыми свойствами. Низкое тепловыделение во время активации обеспечивает максимальную безопасность пациента. Тонкий слой гидрогеля нейтральных электродов BOWA MEDICAL обеспечивает более быстрое рассеивание тепла и значительно меньший нагрев. Инновационный гидрогель: сверхтонкий слой гидрогеля обеспечивает низкую теплоотдачу, оптимальный контакт с кожей и поглощение влаги. Адаптация к телу: эластичное покрытие из вспененного материала для идеальной адаптации к форме тела. Жидкоотталкивающие: дополнительная защита за счет водоотталкивающих веществ снаружи. Защита: склеенные защитные кромки для оптимальной фиксации и изоляции. Полная безопасность: предохранительное кольцо для оптимальной симметрии тока и идеальной поддержки для современных систем контроля качества контактов. Электроды доступны в различных исполнениях и имеют стандартный контактный язычок 25 мм или фиксированный соединительный кабель. Нейтральный электрод разовый разделенный 140см² 3м

- Размер : 140 см²
- Кабель: 3 м
- Общий вес брутто : 760г
- Вес нетто : 35 г
- Монополярный / биполярный / пассивный : Пассивный
- Одноразовые / многоразовые : Одноразового использования
- Стерильно / нестерильно : Нестерильный
- Подготовка : Не допустимо
- Тип коннектора: 2-контактный International REM
- Допустимые комбинации : Разрешенные генераторы
- Примечание : сплит, для взрослых > 15 кг

Комплектация

Нейтральный электрод разовый разделенный 140см² 3м - 15 ш

Нейтральный электрод разовый EASY разделенный 110см² 3м



Артикул: 818-112

Одноразовые нейтральные электроды от BOWA MEDICAL обеспечивают оптимальный контакт между электрохирургической установкой и пациентом.

Современный гидрогель и универсальное распределение электродов обеспечивают высокий уровень безопасности пациента.

Сочетание нового анатомически оптимизированного дизайна и водоотталкивающего внешнего вида обеспечивает идеальную адаптацию и защиту тела.

Нейтральные электроды обладают такими полезными функциями, как разгрузка от натяжения, безопасные кромки и оптимизированный кабель.

Предварительно подключенный кабель имеет очень плоское соединение. Это сводит к минимуму риск возникновения точек давления в точках соединения на теле пациента

Нейтральные электроды BOWA MEDICAL впечатляют своими идеальными тепловыми свойствами.

Благодаря низкому тепловыделению во время активации нейтральные электроды обеспечивают максимальную безопасность пациента.

Иновационный гидрогель: сверхтонкий слой гидрогеля для малой аккумуляции тепла, оптимального контакта с кожей и поглощения влаги

Адаптация к телу: эластичное покрытие из вспененного материала для идеальной адаптации к форме тела

Жидкоотталкивающее средство: дополнительная защита за счет водоотталкивающего материала

Защита: склеенные защитные кромки для оптимальной фиксации и изоляции

Полная безопасность: предохранительное кольцо для оптимальной симметрии тока и идеальная опора для современных систем контроля качества контактов

Нейтральный электрод разовый EASY разделенный 110см² 3м

- Размер : 110 см²
- Кабель: 3 м
- Общий вес брутто : 40 г
- Вес нетто : 35 г
- Монополярный / биполярный / пассивный : Пассивный
- Одноразовые / многоразовые : Одноразового использования
- Стерильно / нестерильно : Нестерильный
- Подготовка : Не допустимо
- Тип коннектора: 2-контактный International REM
- Допустимые комбинации : Разрешенные генераторы
- Примечание : отдельный, универсальный > 5 кг

Комплектация

Нейтральный электрод одноразового пользования, EASY, разделенный, 110 см², кабель L=3 м - 15 шт.

Нейтральный электрод разовый EASY разделенный 90см² 3м



Артикул: 818-092

Одноразовые нейтральные электроды от BOWA MEDICAL обеспечивают оптимальный контакт между электрохирургической установкой и пациентом.

Современный гидрогель и универсальное распределение электродов обеспечивают высокий уровень безопасности пациента.

Сочетание нового анатомически оптимизированного дизайна и водоотталкивающего внешнего вида обеспечивает идеальную адаптацию и защиту тела.

Нейтральные электроды обладают такими полезными функциями, как разгрузка от натяжения, безопасные кромки и оптимизированный кабель.

Предварительно подключенный кабель имеет очень плоское соединение.

Это сводит к минимуму риск возникновения точек давления в точках соединения на теле пациента.

Благодаря низкому тепловыделению во время активации нейтральные электроды обеспечивают максимальную безопасность пациента.

Тонкий слой гидрогеля обеспечивает более быстрое рассеивание тепла и значительно меньший нагрев по сравнению с текущим рыночным стандартом.

Продукция имеет знак CE в соответствии с директивой 93/42 СОС и соответствует стандартам DIN EN ISO 10993 и IEC 60601-2-2.

Инновационный гидрогель: сверхтонкий слой гидрогеля для малой аккумуляции тепла, оптимального контакта с кожей и поглощения влаги

Адаптация к телу: эластичное покрытие из вспененного материала для идеальной адаптации к форме тела

Жидкоотталкивающее средство: дополнительная защита за счет водоотталкивающего материала

Защита: склеенные защитные кромки для оптимальной фиксации и изоляции

Полная безопасность: предохранительное кольцо для оптимальной симметрии тока и идеальная опора для современных систем контроля качества контактов

Нейтральный электрод разовый EASY разделенный 90см² 3м

- Размер : 90 см²
- Длина: 136 мм
- Кабель: 3 м
- Общий вес брутто : 43г
- Вес нетто : 34г
- Монополярный / биполярный / пассивный : Пассивный
- Одноразовые / многоразовые : Одноразового использования
- Стерильно / нестерильно : Нестерильный
- Подготовка : Не допустимо
- Допустимые комбинации : Разрешенные генераторы
- Примечание : отдельный, универсальный > 5 кг

Комплектация

В Нейтральный электрод одноразового пользования, EASY, разделенный, 90 см², кабель L=3 м - 15 шт

Нейтральный электрод разовый EASY разделенный 70cm² 3м



Артикул: 818-072

Нейтральный электрод, 70 см², раздельный, с кабелем 3 м, EASY для маленьких пациентов. Оптимизированная подгонка и компактная конструкция облегчают безопасное и полное наложение нейтральных электродов в соответствии с анатомическими требованиями для маленьких пациентов. Для младенцев доступны электроды со специально удлиненными соединительными лапками. Это обеспечивает больший радиус действия для подключения кабельного зажима и помогает избежать точек давления.

Оптимальные пространственные условия преобладают при использовании версий с постоянно подключенным кабелем, поскольку нет необходимости в зажиме.

Формы и размеры нейтральных электродов BOWA, оптимизированные для маленьких пациентов, дают возможность наложить нейтральный электрод на всю поверхность.

Из-за меньшей поверхности электродов нейтральные электроды для младенцев и младенцев всегда имеют ограниченную максимальную мощность для защиты пациента.

Проводные нейтральные электроды доступны в индивидуальной упаковке по 15 и более штук.

Беспроводные нейтральные электроды поставляются в упаковках по 5 штук, по 50 и более штук в упаковке.

Нейтральный электрод разовый EASY разделенный 70cm² 3м


- Размер : 70 см²
- Кабель: 3 м
- Общий вес брутто : 723 г
- Вес нетто : 32 г
- Монополярный / биполярный / пассивный : Пассивный
- Одноразовые / многоразовые : Одноразового использования
- Стерильно / нестерильно : Нестерильный
- Подготовка : Не допустимо
- Тип коннектора: 2-контактный International REM
- Допустимые комбинации : Разрешенные генераторы
- Примечание : раздельный, универсальный > 5 кг, ограничение мощности 200 Вт

Комплектация

Нейтральный электрод одноразового пользования, EASY, разделенный, 70 см², кабель L=3 м - 15 шт

Нейтральный электрод разовый разделенный 40см² 3м

Артикул: 818-071

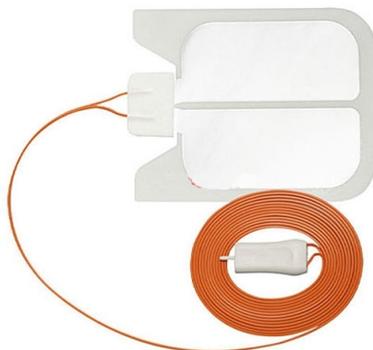

Оптимизированная подгонка и компактная конструкция облегчают безопасное и полное наложение нейтральных электродов в соответствии с анатомическими требованиями для маленьких пациентов. Для младенцев доступны электроды со специально удлиненными соединительными лапками. Это обеспечивает больший радиус действия для подключения кабельного зажима и помогает избежать точек давления.

Оптимальные пространственные условия преобладают при использовании версий с постоянно подключенным кабелем, поскольку нет необходимости в зажиме.

Формы и размеры нейтральных электродов BOWA, оптимизированные для маленьких пациентов, дают возможность наложить нейтральный электрод на всю поверхность.

Из-за меньшей поверхности электродов нейтральные электроды для младенцев и младенцев всегда имеют ограниченную максимальную мощность для защиты пациента

Проводные нейтральные электроды доступны в индивидуальной упаковке по 15 и более штук.

Беспроводные нейтральные электроды поставляются в упаковках по 5 штук, по 50 и более штук в упаковке

Нейтральный электрод разовый разделенный 40см² 3м

Размер : 70 см²

Кабель: 3 м

Общий вес брутто : 723 г

Вес нетто : 32 г

Монополярный / биполярный / пассивный : Пассивный

Одноразовые / многоразовые : Одноразового использования

Стерильно / нестерильно : Нестерильный

Подготовка : Не допустимо

Тип коннектора: 2-контактный International REM


Допустимые комбинации : Разрешенные генераторы

Примечание : сплит, для детей 5-15 кг, ограничение мощности 200 Вт

Комплектация

Нейтральный электрод одноразового пользования, разделенный, 40 см², кабель L=3 м - 15 шт

Нейтральный электрод разовый EASY разделенный 40cm² 3м

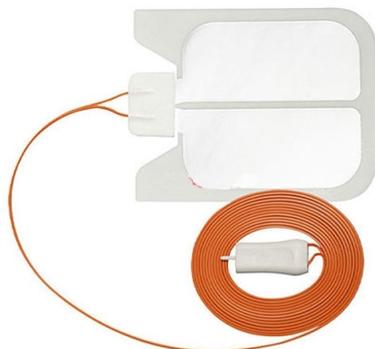

Артикул: 818-042

Оптимизированная подгонка и компактная конструкция облегчают безопасное и полное наложение нейтральных электродов в соответствии с анатомическими требованиями для маленьких пациентов. Для младенцев доступны электроды со специально удлиненными соединительными лапками. Это обеспечивает больший радиус действия для подключения кабельного зажима и помогает избежать точек давления.

Оптимальные пространственные условия преобладают при использовании версий с постоянно подключенным кабелем, поскольку нет необходимости в зажиме.

Формы и размеры нейтральных электродов BOWA, оптимизированные для маленьких пациентов, дают возможность наложить нейтральный электрод на всю поверхность.

Из-за меньшей поверхности электродов нейтральные электроды для младенцев и младенцев всегда имеют ограниченную максимальную мощность для защиты пациента

Проводные нейтральные электроды доступны в индивидуальной упаковке по 15 и более штук.

Беспроводные нейтральные электроды поставляются в упаковках по 5 штук, по 50 и более штук в упаковке

Нейтральный электрод разовый EASY разделенный 40cm² 3м

Размер : 40 см²

Кабель: 3 м

Общий вес брутто : 699 г

Вес нетто : 31 г

Монополярный / биполярный / пассивный : Пассивный

Одноразовые / многоразовые : Одноразового использования

Стерильно / нестерильно : Нестерильный

Подготовка : Не допустимо

Тип коннектора: 2-контактный International NON-REM

Допустимые комбинации : Разрешенные генераторы

Комплектация

Нейтральный электрод одноразового пользования, EASY, разделенный, 40 cm², кабель 3 м -15 шт.

Нейтральный электрод разовый не разделенный 110см² 3м

Артикул: 817-110



С помощью нейтральных электродов BOWA MEDICAL возможно надежное соединение между электрохирургической установкой и пациентом.
Современный гидрогель и универсальное распределение электродов обеспечивают максимальную безопасность пациента.
Сочетание нового анатомически оптимизированного дизайна и водоотталкивающего внешнего вида обеспечивает идеальную адаптацию и защиту тела.
Одноразовые нейтральные электроды впечатляют своими идеальными тепловыми свойствами.
Низкое тепловыделение во время активации обеспечивает максимальную безопасность пациента.
Тонкий слой гидрогеля нейтральных электродов BOWA MEDICAL обеспечивает более быстрое рассеивание тепла и значительно меньший нагрев.
Инновационный гидрогель: сверхтонкий слой гидрогеля обеспечивает низкую теплоотдачу, оптимальный контакт с кожей и поглощение влаги
Адаптация к телу: эластичное покрытие из вспененного материала для идеальной адаптации к форме тела
Жидкоотталкивающие: дополнительная защита за счет водоотталкивающих веществ снаружи
Защита: склеенные защитные кромки для оптимальной фиксации и изоляции
Полная безопасность: предохранительное кольцо для оптимальной симметрии тока и идеальной поддержки для современных систем контроля качества контактов
Электроды доступны в различных исполнениях и имеют стандартный контактный язычок 25 мм или фиксированный соединительный кабель.
Нейтральный электрод разовый не разделенный 110см² 3м

Размер : 110 см²
Кабель: 3 м
Общий вес брутто : 761 г
Вес нетто : 35 г
Монополярный / биполярный / пассивный : Пассивный
Одноразовые / многоразовые : Одноразового использования
Стерильно / нестерильно : Нестерильный
Подготовка : Не допустимо
Тип коннектора: 2-контактный International NON-REM
Допустимые комбинации : Разрешенные генераторы

Комплектация

Нейтральный электрод разовый не разделенный 110см² 3м - 15 шт.

Нейтральный электрод разовый не разделенный 70см² 3м



Артикул: 817-070

Оптимизированная подгонка и компактная конструкция облегчают безопасное и полное наложение нейтральных электродов в соответствии с анатомическими требованиями для маленьких пациентов. Для младенцев доступны электроды со специально удлиненными соединительными лапками. Это обеспечивает больший радиус действия для подключения кабельного зажима и помогает избежать точек давления.

Оптимальные пространственные условия преобладают при использовании версий с постоянно подключенным кабелем, поскольку нет необходимости в зажиме.

Формы и размеры нейтральных электродов BOWA, оптимизированные для маленьких пациентов, дают возможность наложить нейтральный электрод на всю поверхность.

Из-за меньшей поверхности электродов нейтральные электроды для младенцев и младенцев всегда имеют ограниченную максимальную мощность для защиты пациента

Проводные нейтральные электроды доступны в индивидуальной упаковке по 15 и более штук.

Беспроводные нейтральные электроды поставляются в упаковках по 5 штук, по 50 и более штук в упаковке

Нейтральный электрод разовый не разделенный 70см² 3м

- Размер : 70 см²
- Кабель: 3 м
- Общий вес брутто : 722 г
- Вес нетто : 32 г
- Монополярный / биполярный / пассивный : Пассивный
- Одноразовые / многоразовые : Одноразового использования
- Стерильно / нестерильно : Нестерильный
- Подготовка : Не допустимо
- Тип коннектора: 2-контактный International NON-REM
- Допустимые комбинации : Разрешенные генераторы

Комплектация

Нейтральный электрод одноразового пользования, не разделенный, 70 см², кабель 3 м - 15 шт.

Нейтральный электрод разовый не разделенный 40см² 3м



Артикул: 817-070

Нейтральный электрод, 70 см², раздельный, с кабелем 3 м, EASY для маленьких пациентов. Оптимизированная подгонка и компактная конструкция облегчают безопасное и полное наложение нейтральных электродов в соответствии с анатомическими требованиями для маленьких пациентов. Для младенцев доступны электроды со специально удлиненными соединительными лапками. Это обеспечивает больший радиус действия для подключения кабельного зажима и помогает избежать точек давления.

Оптимальные пространственные условия преобладают при использовании версий с постоянно подключенным кабелем, поскольку нет необходимости в зажиме.

Формы и размеры нейтральных электродов BOWA, оптимизированные для маленьких пациентов, дают возможность наложить нейтральный электрод на всю поверхность.

Из-за меньшей поверхности электродов нейтральные электроды для младенцев и младенцев всегда имеют ограниченную максимальную мощность для защиты пациента.

Проводные нейтральные электроды доступны в индивидуальной упаковке по 15 и более штук.

Беспроводные нейтральные электроды поставляются в упаковках по 5 штук, по 50 и более штук в упаковке.

Нейтральный электрод разовый EASY разделенный 70см² 3м


- Размер : 70 см²
- Кабель: 3 м
- Общий вес брутто : 723 г
- Вес нетто : 32 г
- Монополярный / биполярный / пассивный : Пассивный
- Одноразовые / многоразовые : Одноразового использования
- Стерильно / нестерильно : Нестерильный
- Подготовка : Не допустимо
- Тип коннектора: 2-контактный International REM
- Допустимые комбинации : Разрешенные генераторы
- Примечание : раздельный, универсальный > 5 кг, ограничение мощности 200 Вт

Комплектация

Нейтральный электрод одноразового пользования, EASY, разделенный, 70 см², кабель L=3 м - 15 шт

Нейтральный электрод разовый EASY разделенный 70cm² 3м

Артикул: 817-040

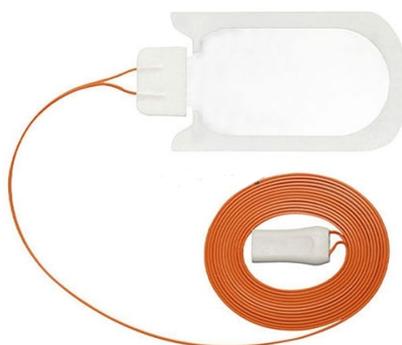

Оптимизированная подгонка и компактная конструкция облегчают безопасное и полное наложение нейтральных электродов в соответствии с анатомическими требованиями для маленьких пациентов. Для младенцев доступны электроды со специально удлиненными соединительными лапками. Это обеспечивает больший радиус действия для подключения кабельного зажима и помогает избежать точек давления.

Оптимальные пространственные условия преобладают при использовании версий с постоянно подключенным кабелем, поскольку нет необходимости в зажиме.

Формы и размеры нейтральных электродов BOWA, оптимизированные для маленьких пациентов, дают возможность наложить нейтральный электрод на всю поверхность.

Из-за меньшей поверхности электродов нейтральные электроды для младенцев и младенцев всегда имеют ограниченную максимальную мощность для защиты пациента

Проводные нейтральные электроды доступны в индивидуальной упаковке по 15 и более штук.

Беспроводные нейтральные электроды поставляются в упаковках по 5 штук, по 50 и более штук в упаковке

Нейтральный электрод разовый не разделенный 40cm² 3м


- Размер : 40 см²
- Кабель: 3 м
- Общий вес брутто : 719 г
- Вес нетто : 31 г
- Монополярный / биполярный / пассивный : Пассивный
- Одноразовые / многоразовые : Одноразового использования
- Стерильно / нестерильно : Нестерильный
- Подготовка : Не допустимо
- Тип коннектора: 2-контактный International NON-REM
- Допустимые комбинации : Разрешенные генераторы

Комплектация

Нейтральный электрод разовый не разделенный 40cm² 3м - 15 шт.

Нейтральный электрод разовый EASY разделенный 160см²

Артикул: 816-162

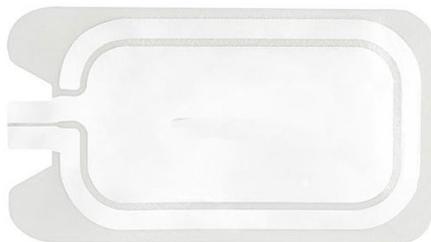

С помощью нейтральных электродов BOWA MEDICAL возможно надежное соединение между электрохирургической установкой и пациентом.

Современный гидрогель и универсальное распределение электродов обеспечивают максимальную безопасность пациента.

Сочетание нового анатомически оптимизированного дизайна и водоотталкивающего внешнего вида обеспечивает идеальную адаптацию и защиту тела.

Одноразовые нейтральные электроды впечатляют своими идеальными тепловыми свойствами.

Низкое тепловыделение во время активации обеспечивает максимальную безопасность пациента.

Тонкий слой гидрогеля нейтральных электродов BOWA MEDICAL обеспечивает более быстрое рассеивание тепла и значительно меньший нагрев.

Инновационный гидрогель: сверхтонкий слой гидрогеля обеспечивает низкую теплоотдачу, оптимальный контакт с кожей и поглощение влаги

Адаптация к телу: эластичное покрытие из вспененного материала для идеальной адаптации к форме тела

Жидкоотталкивающие: дополнительная защита за счет водоотталкивающих веществ снаружи

Защита: склеенные защитные кромки для оптимальной фиксации и изоляции

Полная безопасность: предохранительное кольцо для оптимальной симметрии тока и идеальной поддержки для современных систем контроля качества контактов

Электроды доступны в различных исполнениях и имеют стандартный контактный язычок 25 мм или фиксированный соединительный кабель.


Нейтральный электрод разовый EASY разделенный 160см²

- Размер : 160 см²
- Кабель: Без кабеля
- Общий вес брутто : 1248 г
- Вес нетто : 10 г
- Монополярный / биполярный / пассивный : Пассивный
- Одноразовые / многоразовые : Одноразового использования
- Стерильно / нестерильно : Нестерильный
- Подготовка : Не допустимо
- Допустимые комбинации : 101-150, 294-050, 380-050, 386-050, разрешенные генератор

Комплектация

Нейтральный электрод одноразового пользования, EASY, разделенный, 160 см² - 15 шт.

Нейтральный электрод разовый разделенный 140см²

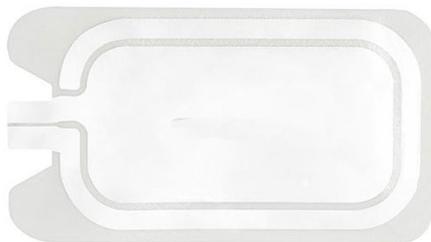

Артикул: 816-141

С помощью нейтральных электродов BOWA MEDICAL возможно надежное соединение между электрохирургической установкой и пациентом. Современный гидрогель и универсальное распределение электродов обеспечивают максимальную безопасность пациента.

Сочетание нового анатомически оптимизированного дизайна и водоотталкивающего внешнего вида обеспечивает идеальную адаптацию и защиту тела.

Одноразовые нейтральные электроды впечатляют своими идеальными тепловыми свойствами.

Низкое тепловыделение во время активации обеспечивает максимальную безопасность пациента.

Тонкий слой гидрогеля нейтральных электродов BOWA MEDICAL обеспечивает более быстрое рассеивание тепла и значительно меньший нагрев.

Инновационный гидрогель: сверхтонкий слой гидрогеля обеспечивает низкую теплоотдачу, оптимальный контакт с кожей и поглощение влаги

Адаптация к телу: эластичное покрытие из вспененного материала для идеальной адаптации к форме тела

Жидкоотталкивающие: дополнительная защита за счет водоотталкивающих веществ снаружи

Защита: склеенные защитные кромки для оптимальной фиксации и изоляции

Полная безопасность: предохранительное кольцо для оптимальной симметрии тока и идеальной поддержки для современных систем контроля качества контактов

Электроды доступны в различных исполнениях и имеют стандартный контактный язычок 25 мм или фиксированный соединительный кабель.


- Размер : 140 см²
- Кабель: Без кабеля
- Общий вес брутто : 965 г
- Вес нетто : 8 г
- Монополярный / биполярный / пассивный : Пассивный
- Одноразовые / многоразовые : Одноразового использования
- Стерильно / нестерильно : Нестерильный
- Очистка / дезинфекция : Не допустимо
- Допустимые комбинации : 101-150, 294-050, 380-050, 386-050, разрешенные генераторы

Комплектация

Нейтральный электрод одноразового пользования, разделенный, 140 см² - 100 шт

Нейтральный электрод разовый EASY разделенный 110см²

Артикул: 816-112

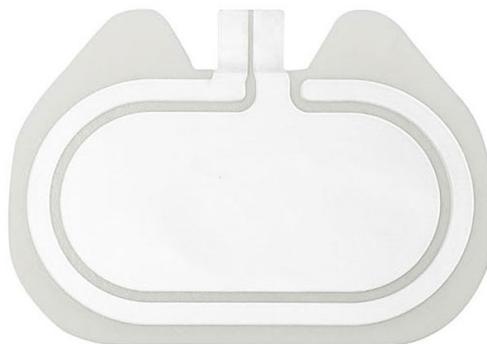

С помощью нейтральных электродов BOWA MEDICAL возможно надежное соединение между электрохирургической установкой и пациентом. Современный гидрогель и универсальное распределение электродов обеспечивают максимальную безопасность пациента.

Сочетание нового анатомически оптимизированного дизайна и водоотталкивающего внешнего вида обеспечивает идеальную адаптацию и защиту тела.

Одноразовые нейтральные электроды впечатляют своими идеальными тепловыми свойствами.

Низкое тепловыделение во время активации обеспечивает максимальную безопасность пациента.

Тонкий слой гидрогеля нейтральных электродов BOWA MEDICAL обеспечивает более быстрое рассеивание тепла и значительно меньший нагрев.

Инновационный гидрогель: сверхтонкий слой гидрогеля обеспечивает низкую теплоотдачу, оптимальный контакт с кожей и поглощение влаги

Адаптация к телу: эластичное покрытие из вспененного материала для идеальной адаптации к форме тела

Жидкоотталкивающие: дополнительная защита за счет водоотталкивающих веществ снаружи

Защита: склеенные защитные кромки для оптимальной фиксации и изоляции

Полная безопасность: предохранительное кольцо для оптимальной симметрии тока и идеальной поддержки для современных систем контроля качества контактов

Электроды доступны в различных исполнениях и имеют стандартный контактный язычок 25 мм или фиксированный соединительный кабель.

Нейтральный электрод разовый EASY разделенный 160см²


- Размер : 160 см²
- Кабель: Без кабеля
- Общий вес брутто : 1248 г
- Вес нетто : 10 г
- Монополярный / биполярный / пассивный : Пассивный
- Одноразовые / многоразовые : Одноразового использования
- Стерильно / нестерильно : Нестерильный
- Подготовка : Не допустимо
- Допустимые комбинации : 101-150, 294-050, 380-050, 386-050, разрешенные генератор

Комплектация

Нейтральный электрод разовый EASY разделенный 110см² - 100 шт

Нейтральный электрод разовый EASY разделенный 70cm²

Артикул: 816-071

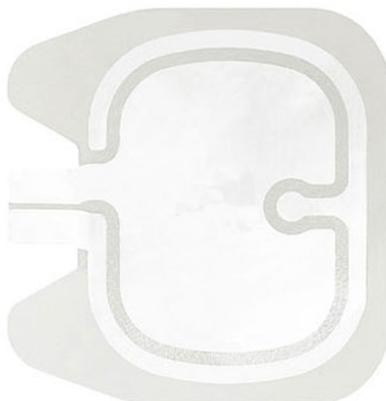

Оптимизированная подгонка и компактная конструкция облегчают безопасное и полное наложение нейтральных электродов в соответствии с анатомическими требованиями для маленьких пациентов.

Для младенцев доступны электроды со специально удлиненными соединительными лапками. Это обеспечивает больший радиус действия для подключения кабельного зажима и помогает избежать точек давления.

Оптимальные пространственные условия преобладают при использовании версий с постоянно подключенным кабелем, поскольку нет необходимости в зажиме.

Формы и размеры нейтральных электродов BOWA, оптимизированные для маленьких пациентов, дают возможность наложить нейтральный электрод на всю поверхность.

Из-за меньшей поверхности электродов нейтральные электроды для младенцев и младенцев всегда имеют ограниченную максимальную мощность для защиты пациента

Проводные нейтральные электроды доступны в индивидуальной упаковке по 15 и более штук.

Беспроводные нейтральные электроды поставляются в упаковках по 5 штук, по 50 и более штук в упаковке

Нейтральный электрод разовый EASY разделенный 70cm²


- Размер : 70 cm²
- Кабель: Без кабеля
- Общий вес брутто : 816 г
- Вес нетто : 5 г
- Монополярный / биполярный / пассивный : Пассивный
- Одноразовые / многоразовые : Одноразового использования
- Стерильно / нестерильно : Нестерильный
- Подготовка : Не допустимо
- Допустимые комбинации : 101-150, 294-050, 380-050, 386-050, разрешенные генераторы

Комплектация

Нейтральный электрод разовый EASY разделенный 70cm² - 100 шт

Нейтральный электрод разовый разделенный 70см² для новорожденных

Артикул: 816-072

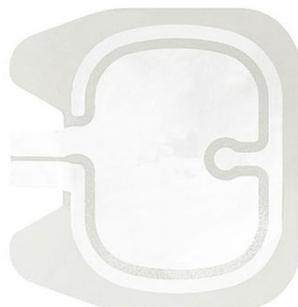

Оптимизированная подгонка и компактная конструкция облегчают безопасное и полное наложение нейтральных электродов в соответствии с анатомическими требованиями для маленьких пациентов.

Для младенцев доступны электроды со специально удлиненными соединительными лапками. Это обеспечивает большой радиус действия для подключения кабельного зажима и помогает избежать точек давления.

Оптимальные пространственные условия преобладают при использовании версий с постоянно подключенным кабелем, поскольку нет необходимости в зажиме.

Формы и размеры нейтральных электродов BOWA, оптимизированные для маленьких пациентов, дают возможность наложить нейтральный электрод на всю поверхность.

Из-за меньшей поверхности электродов нейтральные электроды для младенцев и младенцев всегда имеют ограниченную максимальную мощность для защиты пациента

Проводные нейтральные электроды доступны в индивидуальной упаковке по 15 и более штук.

Беспроводные нейтральные электроды поставляются в упаковках по 5 штук, по 50 и более штук в упаковке

Нейтральный электрод разовый разделенный 70см² для новорожденных


- Размер : 70 см²
- Кабель: Без кабеля
- Общий вес брутто : 816 г
- Вес нетто : 5 г
- Монополярный / биполярный / пассивный : Пассивный
- Одноразовые / многоразовые : Одноразового использования
- Стерильно / нестерильно : Нестерильный
- Подготовка : Не допустимо
- Допустимые комбинации : 101-150, 294-050, 380-050, 386-050, разрешенные генераторы

Комплектация

Нейтральный электрод разовый разделенный 70см² для новорожденных - 100 шт

Нейтральный электрод разовый EASY разделенный 40см² детский

Артикул: 816-042

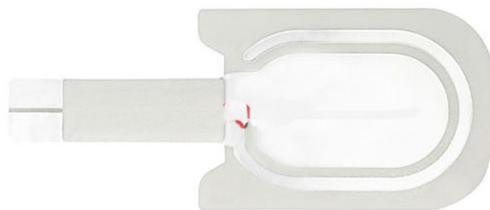

Оптимизированная подгонка и компактная конструкция облегчают безопасное и полное наложение нейтральных электродов в соответствии с анатомическими требованиями для маленьких пациентов.

Для младенцев доступны электроды со специально удлиненными соединительными лапками. Это обеспечивает больший радиус действия для подключения кабельного зажима и помогает избежать точек давления.

Оптимальные пространственные условия преобладают при использовании версий с постоянно подключенным кабелем, поскольку нет необходимости в зажиме.

Формы и размеры нейтральных электродов BOWA, оптимизированные для маленьких пациентов, дают возможность наложить нейтральный электрод на всю поверхность.

Из-за меньшей поверхности электродов нейтральные электроды для младенцев и младенцев всегда имеют ограниченную максимальную мощность для защиты пациента

Проводные нейтральные электроды доступны в индивидуальной упаковке по 15 и более штук.

Беспроводные нейтральные электроды поставляются в упаковках по 5 штук, по 50 и более штук в упаковке

Нейтральный электрод разовый EASY разделенный 40см² детский

- Размер : 70 см²
- Кабель: Без кабеля
- Общий вес брутто : 816 г
- Вес нетто : 5 г
- Монополярный / биполярный / пассивный : Пассивный
- Одноразовые / многоразовые : Одноразового использования
- Стерильно / нестерильно : Нестерильный
- Подготовка : Не допустимо
- Допустимые комбинации : 101-150, 294-050, 380-050, 386-050, разрешенные генераторы

Комплектация

Нейтральный электрод разовый EASY разделенный 40см² детский - 100 шт

Нейтральный электрод одноразовый не разделенный 140 см²

Артикул: 815-140



С помощью нейтральных электродов BOWA MEDICAL возможно надежное соединение между электрохирургической установкой и пациентом.

Современный гидрогель и универсальное распределение электродов обеспечивают максимальную безопасность пациента.

Сочетание нового анатомически оптимизированного дизайна и водоотталкивающего внешнего вида обеспечивает идеальную адаптацию и защиту тела

Одноразовые нейтральные электроды впечатляют своими идеальными тепловыми свойствами.

Низкое тепловыделение во время активации обеспечивает максимальную безопасность пациента.

Тонкий слой гидрогеля нейтральных электродов BOWA MEDICAL обеспечивает более быстрое рассеивание тепла и значительно меньший нагрев.

Инновационный гидрогель: сверхтонкий слой гидрогеля обеспечивает низкую теплоотдачу, оптимальный контакт с кожей и поглощение влаги

Адаптация к телу: эластичное покрытие из вспененного материала для идеальной адаптации к форме тела

Жидкоотталкивающие: дополнительная защита за счет водоотталкивающих веществ снаружи

Защита: склеенные защитные кромки для оптимальной фиксации и изоляции

Полная безопасность: предохранительное кольцо для оптимальной симметрии тока и идеальной поддержки для современных систем контроля качества контактов

Электроды доступны в различных исполнениях и имеют стандартный контактный язычок 25 мм или фиксированный соединительный кабель.

Нейтральный электрод одноразовый не разделенный 140 см²

- Размер : 140 см²
- Кабель: Без кабеля
- Общий вес брутто : 1093 г
- Вес нетто : 8 г
- Монополярный / биполярный / пассивный : Пассивный
- Одноразовые / многоразовые : Одноразового использования
- Стерильно / нестерильно : Нестерильный
- Подготовка : Не допустимо
- Допустимые комбинации : 101-150, 294-050, 380-050, 386-050, разрешенные генераторы

Комплектация

Нейтральный электрод одноразового пользования, не разделенный, 140 см² - 100 шт.

Нейтральный электрод одноразовый не разделенный 110 см²

Артикул: 815-110



Одноразовые нейтральные электроды от BOWA MEDICAL обеспечивают оптимальный контакт между электрохирургической установкой и пациентом. Современный гидрогель и универсальное распределение электродов обеспечивают высокий уровень безопасности пациента. Сочетание нового анатомически оптимизированного дизайна и водоотталкивающего внешнего вида обеспечивает идеальную адаптацию и защиту тела. Нейтральные электроды обладают такими полезными функциями, как разгрузка от натяжения, безопасные кромки и оптимизированный кабель. Предварительно подключенный кабель имеет очень плоское соединение. Это сводит к минимуму риск возникновения точек давления в точках соединения на теле пациента. Нейтральные электроды BOWA MEDICAL впечатляют своими идеальными тепловыми свойствами. Благодаря низкому тепловыделению во время активации нейтральные электроды обеспечивают максимальную безопасность пациента. Инновационный гидрогель: сверхтонкий слой гидрогеля для малой аккумуляции тепла, оптимального контакта с кожей и поглощения влаги. Адаптация к телу: эластичное покрытие из вспененного материала для идеальной адаптации к форме тела. Жидкоотталкивающее средство: дополнительная защита за счет водоотталкивающего материала. Защита: склеенные защитные кромки для оптимальной фиксации и изоляции. Полная безопасность: предохранительное кольцо для оптимальной симметрии тока и идеальная опора для современных систем контроля качества контактов. Нейтральный электрод одноразовый не разделенный 110 см²

Размер : 110 см²
Кабель: Без кабеля
Общий вес брутто : 1018 г
Вес нетто : 7 г
Монополярный / биполярный / пассивный : Пассивный
Одноразовые / многоразовые : Одноразового использования
Стерильно / нестерильно : Нестерильный
Подготовка : Не допустимо
Допустимые комбинации : 101-150, 294-050, 380-050, 386-050, разрешенные генераторы
Примечание : неразрезной, универсальный > 5 кг

Комплектация
Нейтральный электрод одноразовый не разделенный 110 см² - 100 шт

Нейтральный электрод одноразовый не разделенный 70 см²

Артикул: 815-070



Оптимизированная подгонка и компактная конструкция облегчают безопасное и полное наложение нейтральных электродов в соответствии с анатомическими требованиями для маленьких пациентов.
Для младенцев доступны электроды со специально удлиненными соединительными лапками.
Это обеспечивает больший радиус действия для подключения кабельного зажима и помогает избежать точек давления.
Оптимальные пространственные условия преобладают при использовании версий с постоянно подключенным кабелем, поскольку нет необходимости в зажиме.
Формы и размеры нейтральных электродов BOWA, оптимизированные для маленьких пациентов, дают возможность наложить нейтральный электрод на всю поверхность.
Из-за меньшей поверхности электродов нейтральные электроды для младенцев и младенцев всегда имеют ограниченную максимальную мощность для защиты пациента
Проводные нейтральные электроды доступны в индивидуальной упаковке по 15 и более штук.
Беспроводные нейтральные электроды поставляются в упаковках по 5 штук, по 50 и более штук в упаковке
Нейтральный электрод одноразовый не разделенный 70 см²

Размер : 70 см²

Кабель: Без кабеля

Общий вес брутто : 757 г

Вес нетто : 5 г

Монополярный / биполярный / пассивный : Пассивный

Одноразовые / многоразовые : Одноразового использования

Стерильно / нестерильно : Нестерильный

Подготовка : Не допустимо

Допустимые комбинации : 101-150, 294-050, 380-050, 386-050, разрешенные генераторы

Комплектация

Нейтральный электрод одноразовый не разделенный 70 см² - 100 шт

Нейтральный электрод одноразовый не разделенный 40 см²

Артикул: 815-040



Оптимизированная подгонка и компактная конструкция облегчают безопасное и полное наложение нейтральных электродов в соответствии с анатомическими требованиями для маленьких пациентов.

Для младенцев доступны электроды со специально удлиненными соединительными лапками.

Это обеспечивает больший радиус действия для подключения кабельного зажима и помогает избежать точек давления. Оптимальные пространственные условия преобладают при использовании версий с постоянно подключенным кабелем, поскольку нет необходимости в зажиме.

Формы и размеры нейтральных электродов BOWA, оптимизированные для маленьких пациентов, дают возможность наложить нейтральный электрод на всю поверхность.

Из-за меньшей поверхности электродов нейтральные электроды для младенцев и младенцев всегда имеют ограниченную максимальную мощность для защиты пациента

Проводные нейтральные электроды доступны в индивидуальной упаковке по 15 и более штук.

Беспроводные нейтральные электроды поставляются в упаковках по 5 штук, по 50 и более штук в упаковке

Нейтральный электрод одноразовый не разделенный 40 см²

Размер : 40 см²

Кабель: Без кабеля

Общий вес брутто : 740 г

Вес нетто : 5 г

Монополярный / биполярный / пассивный : Пассивный

Одноразовые / многоразовые : Одноразового использования

Стерильно / нестерильно : Нестерильный

Подготовка : Не допустимо

Допустимые комбинации : 101-150, 294-050, 380-050,

386-050, разрешенные генераторы

Комплектация

Нейтральный электрод одноразовый не разделенный 40

см² - 100 шт

Нейтральный электрод для детей 150x80мм стандарт

Артикул: 232-003



Многоразовые нейтральные электроды из проводящего силикона замыкают монополярную цепь на пассивной стороне между электрохирургической установкой и пациентом.

Многоразовые возвратные пластины, поставляемые нестерильными, являются хирургическими принадлежностями RF для монополярного применения.

Электроды предназначены для замыкания электрической цепи между пациентом и РЧ генератором на пассивной стороне.

Электроды крепятся к пациенту с помощью резиновой ленты.

Дополнительный соединительный кабель подключает его к генератору.

Нейтральный электрод для детей 150x80мм стандарт

Размер : 120 см²

Кабель: 0,5 м

Общий вес брутто : 324 г

Вес нетто : 138 г

Монополярный / биполярный / пассивный : Пассивный

Одноразовые / многоразовые : Многоразовый

Стерильно / нестерильно : Нестерильный

Очистка / дезинфекция : Автоклав

Подготовка : 75 циклов

Допустимые комбинации : 295-050, 385-050, 194-075

Комплектация

Нейтральный электрод - 1 шт

Нейтральный электрод для детей 150x80мм ERBE

Артикул: 193-016



Многоразовые нейтральные электроды из проводящего силикона замыкают монополярную цепь на пассивной стороне между электрохирургической установкой и пациентом.

Многоразовые возвратные пластины, поставляемые нестерильными, являются хирургическими принадлежностями RF для монополярного применения.

Электроды предназначены для замыкания электрической цепи между пациентом и РЧ генератором на пассивной стороне.

Электроды крепятся к пациенту с помощью резиновой ленты.

Дополнительный соединительный кабель подключает его к генератору.

Нейтральный электрод для детей 150x80мм ERBE

Размер : 120 см²

Кабель: 0,5 м

Общий вес брутто : 330 г

Вес нетто : 145 г

Монополярный / биполярный / пассивный : Пассивный

Одноразовые / многоразовые : Многоразовый

Стерильно / нестерильно : Нестерильный

Очистка / дезинфекция : Автоклав

Подготовка : 75 циклов


Допустимые комбинации : 101-003, 194-075

Комплектация

Нейтральный электрод - 1 шт.

Нейтральный электрод разовый Easy 70 см²

Артикул: 816-072

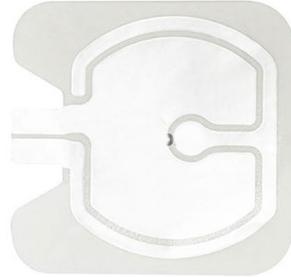

Оптимизированная подгонка и компактная конструкция облегчают безопасное и полное наложение нейтральных электродов в соответствии с анатомическими требованиями для маленьких пациентов.

Для младенцев доступны электроды со специально удлиненными соединительными лапками.

Это обеспечивает больший радиус действия для подключения кабельного зажима и помогает избежать точек давления.

Оптимальные пространственные условия преобладают при использовании версий с постоянно подключенным кабелем, поскольку нет необходимости в зажиме

У маленьких пациентов, таких как дети и младенцы, часто невозможно наложить нейтральный электрод на всю поверхность.

В этих случаях формы и размеры нейтральных электродов BOWA, оптимизированные для этого применения, предлагают практическое решение.

Из-за меньшей поверхности электродов нейтральные электроды для младенцев и младенцев всегда имеют ограниченную максимальную мощность для защиты пациента.

У маленьких пациентов, таких как дети и младенцы, часто невозможно наложить нейтральный электрод на всю поверхность.

В этих случаях формы и размеры нейтральных электродов BOWA, оптимизированные для этого применения, предлагают практическое решение.

Из-за меньшей поверхности электродов нейтральные электроды для младенцев и младенцев всегда имеют ограниченную максимальную мощность для защиты пациента.

Нейтральный электрод разовый Easy 70 см²

Размер : 70 см²

Кабель: Без кабеля

Общий вес брутто : 816 г

Вес нетто : 5 г

Монополярный / биполярный / пассивный : Пассивный

Одноразовые / многоразовые : Одноразового использования

Стерильно / нестерильно : Нестерильный

Подготовка : Не допустимо

Допустимые комбинации : 101-150, 294-050, 380-050,

386-050, разрешенные генераторы

Тип коннектора : 2-контактный International REM

Примечание : отдельный, универсальный > 5 кг, ограничение мощности 200 Вт

Комплектация

Нейтральный электрод разовый Easy 70 см² - 100 шт

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.bowa.nt-rt.ru | | bwa@nt-rt.ru